

TERMOSTATAZIONE

ARGO LAB

GARANZIA
2
ANNI



★ ★ ★ ★ ★
EU ★ ★ ★ ★ ★
Designed



La linea di strumenti ArgoLab offre soluzioni avanzate per il controllo della temperatura, unendo precisione, affidabilità e facilità d'uso.

Progettati per soddisfare le esigenze dei laboratori più esigenti, questi strumenti integrano funzioni moderne come display intuitivi, memorizzazione dati integrata e trasferimento rapido tramite USB.

La conformità alle normative più rigorose, come la Classe di sicurezza DIN 12880, assicura il massimo livello di sicurezza per campioni e operatori.

Ogni dettaglio è stato sviluppato per semplificare il lavoro quotidiano: dai materiali di alta qualità, come l'acciaio inossidabile con angoli arrotondati per una pulizia agevole, ai programmi multi-step che consentono di gestire cicli complessi con grande flessibilità.

Che si tratti di stufe, incubatori o camere climatiche, ArgoLab propone soluzioni complete e versatili, ideali per applicazioni scientifiche, industriali e di ricerca.

Scegliere ArgoLab significa investire in strumenti che combinano innovazione tecnologica e sostenibilità ambientale, garantendo prestazioni elevate e un impatto ambientale ridotto grazie a compressori e sistemi refrigeranti di ultima generazione.

ArgoLab: il partner affidabile per le tue sfide quotidiane in laboratorio.




Touchscreen da 4" per una gestione intuitiva e precisa

Nuovo display touchscreen di ultima generazione, progettato per una gestione intuitiva e precisa delle impostazioni, con navigazione fluida e controllo completo di tutte le funzioni operative.

Visualizzazione grafica dei parametri in tempo reale

Monitoraggio continuo e dettagliato di temperatura, tempo e stato del programma, con grafici chiari per un controllo completo dei dati.

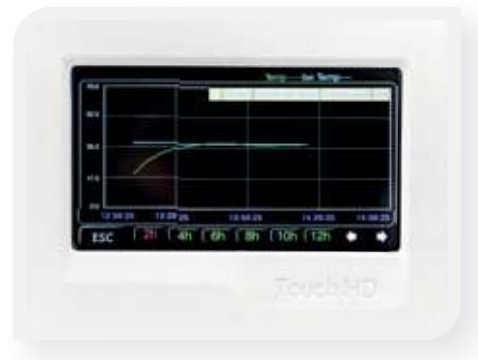

Registro completo e gestione allarmi

Memoria avanzata che registra automaticamente i dati e gli eventi, con funzione allarmi e storico delle operazioni per un controllo impeccabile e preciso.

Accesso multiutente con tre livelli di sicurezza

Tre livelli di autorizzazione, tutti protetti da password, per garantire sicurezza e controllo sui parametri sensibili e sull'utilizzo del dispositivo in ambienti condivisi.

Rampe di temperatura per cicli complessi

Gestione avanzata dei cicli termici con rampe di temperatura configurabili, perfette per applicazioni che richiedono precisione e variabilità.

Archiviazione Interna e Trasferimento Dati via USB

L'unità di archiviazione integrata garantisce il salvataggio continuo dei parametri operativi e di oltre 200.000 dati di processo. La porta USB amplia la capacità di memoria e consente un trasferimento rapido dell'intero archivio, inclusi il registro allarmi e il registro delle operazioni, facilitando una documentazione completa e immediata delle attività.



SERIE **Plus**

Nuovo schermo LCD per una visione chiara ed immediata

Visualizzazione moderna e intuitiva di tutti i parametri essenziali in un'unica schermata: temperatura reale e impostata, velocità della ventola e stato del programma.

Programmazione multi-step per ogni esigenza

Supporto per la gestione di fino a 64 programmi multi-step, offrendo soluzioni avanzate per qualsiasi sequenza di laboratorio.

Interruttore porta per operazioni sicure

Carico e scarico dei campioni senza rischi, grazie all'interruttore porta integrato in tutte le stufe, perfetto anche per incubatori a ventilazione forzata

Memoria interna e scarico USB per gestione dati

L'unità di archiviazione integrata assicura il salvataggio continuo dei parametri operativi e dei dati di processo. La porta USB estende la memoria e consente un trasferimento rapido dell'intero archivio di dati, facilitando la documentazione completa e immediata delle attività.



Termostatazione



NEW TCN SERIE super

- Campo di lavoro: +5 °C Ta ... +300 °C
- Display touchscreen da 4" a colori
- Monitoraggio grafico in tempo reale
- 10 programmi memorizzabili
- Gestione multi-utente a 3 livelli con password
- Registrazione allarmi, operazioni e dati
- Scarico diretto su USB
- Rampe di temperatura configurabili

Offre un **display touchscreen da 4 pollici** con visualizzazione simultanea di tutti i parametri, incluso il **monitoraggio grafico** in tempo reale della temperatura e dello stato dei programmi. Dotata di un sistema di allarmi visivi e acustici, facilmente tacitabili, la stufa include anche una **gestione utente avanzata con tre livelli di autorizzazione**, ciascuno protetto da password, per una maggiore sicurezza sui parametri operativi.

Il timer digitale programmabile consente cicli fino a 99 ore e 59 minuti, con opzioni di funzionamento continuo e partenza ritardata. Un **interruttore porta** facilita il carico e scarico sicuro dei campioni, e la funzione **"temperatura sicura"** limita automaticamente la temperatura massima per proteggere i campioni in ogni fase del ciclo.

La stufa supporta **rampe di temperatura configurabili**, ideali per gestire cicli termici complessi, e offre un **sistema di archiviazione** completo che include registri di allarmi, operazioni e dati. Tutte le informazioni possono essere scaricate direttamente su **chiavetta USB**, garantendo documentazione e tracciabilità avanzata.



Conforme alla **Classe di sicurezza 3.1 (DIN 12880)**, la stufa include un regolatore di temperatura massima a espansione di fluido e un **foro integrato (Ø 5 mm)** per l'inserimento di sensori esterni, assicurando il controllo e la certificazione della temperatura interna. Una soluzione versatile e sicura, perfetta per le applicazioni più esigenti.

Camera in acciaio inossidabile con angoli arrotondati, supporti e **ripiani antiribaltamento** completamente removibili per una pulizia semplice e accurata.
Alimentazione 220 ± 10% V - 50/60 Hz.

Forniti di serie:

ripiani grigliati in acciaio (2 ripiani per i modelli fino a 50 litri, 3 ripiani per i modelli superiori), rapporto di taratura a 150°C eseguito con strumento riferibile Accredia, e chiavetta USB per la registrazione e il trasferimento dei dati.

MODELLI TCN SUPER

	Nome	Volume (litri)	Stabilità a 150 °C	Omogeneità a 150 (°C)	Dim. esterne L x P x A (mm)	Peso (kg)	Potenza (W)	Codice
NEW	TCN 50 SUPER	50	± 0,5	± 3,5	690 x 540 x 635	53	1000	41200502
NEW	TCN 115 SUPER	115	± 0,5	± 3,5	815 x 670 x 750	74	1900	41200512
NEW	TCN 200 SUPER	200	± 0,7	± 4,0	940 x 730 x 905	103	2100	41200522

MODELLI TCN PLUS

	Nome	Volume (litri)	Stabilità a 150 °C	Omogeneità a 150 (°C)	Dim. esterne L x P x A (mm)	Peso (kg)	Potenza (W)	Codice
NEW	TCN 30* PLUS	30	± 0,5	± 3,5	460 x 600 x 685	40	700	41200062
NEW	TCN 50 PLUS	50	± 0,5	± 3,5	690 x 540 x 635	53	1000	41200002
NEW	TCN 115 PLUS	115	± 0,5	± 3,5	815 x 670 x 750	74	1900	41200012
NEW	TCN 200 PLUS	200	± 0,7	± 4,0	940 x 730 x 905	103	2100	41200022

* Campo di lavoro TCN 30: +5°C T amb. ... +200 °C

NEW TCN SERIE Plus

- Campo di lavoro: +5 °C Ta ... +300 °C
- Display LED retroilluminato
- 10 programmi memorizzabili
- Registrazione dati
- Scarico diretto su USB

La stufa ArgoLab versione PLUS offre un display LCD retroilluminato nero che consente la visualizzazione simultanea di tutti i parametri principali, tra cui temperatura reale e quella impostata. Dotata di un sistema di allarmi visivi e acustici, facilmente tacitabili, la stufa include anche una porta USB* per lo scarico dei dati.


Il timer digitale programmabile consente cicli fino a 99 ore e 59 minuti, con opzioni di funzionamento continuo e partenza ritardata.

Un interruttore porta* facilita il carico e scarico sicuro dei campioni, e la funzione "temperatura sicura" limita automaticamente la temperatura massima per proteggere i campioni in ogni fase del ciclo.

Il sistema di archiviazione dei dati* è completo e supporta il trasferimento diretto su chiavetta USB, garantendo una gestione dei dati semplice e sicura.

Conforme alla Classe di sicurezza 3.1 (DIN 12880), la stufa include un regolatore di temperatura massima a espansione di fluido e un foro integrato (Ø 5 mm) per l'inserimento di sensori esterni, assicurando il controllo e la certificazione della temperatura interna. Una soluzione versatile e sicura, perfetta per le applicazioni più esigenti.

*non disponibile su TCN 30

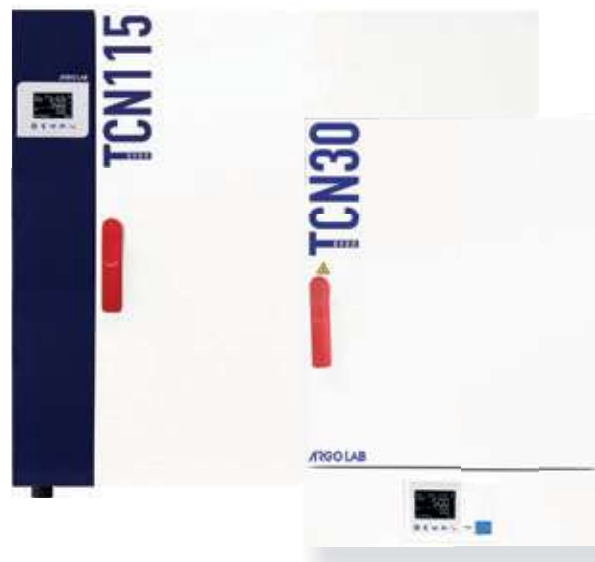

Camera in acciaio inossidabile con angoli arrotondati, supporti e ripiani antiribaltamento completamente removibili per una pulizia semplice e accurata. Alimentazione 220 ± 10% V - 50/60 Hz.

Forniti di serie:

ripiani grigliati in acciaio (2 ripiani per i modelli fino a 50 litri, 3 ripiani per i modelli superiori), rapporto di taratura a 150°C eseguito con strumento riferibile Accredia, e chiavetta USB per la registrazione e il trasferimento dei dati.

ACCESSORI TCN (SUPER E PLUS)

Descrizione	Foto	Codice
Ripiano grigliato in acciaio per TCN 30		41100142
Ripiano grigliato in acciaio per TCN 50		41100102
Ripiano grigliato in acciaio per TCN 115		41100112
Ripiano grigliato in acciaio per TCN 200		41100122
Supporto forato per ripiano TCN 30		41100192
Supporto forato per ripiano TCN 50		41100152
Supporto forato per ripiano TCN 115		41100162
Supporto forato per ripiano TCN 200		41100172
Foro Ø interno 25 mm completo di tappi di chiusura (solo su pareti evidenziate in figura - specificare posizione)		41110152
Foro Ø interno 50 mm completo di tappi di chiusura (solo su pareti evidenziate in figura - specificare posizione)		41110142
Ruote per TCN 200. Set di 4 pezzi		41101172
Manuale IQ-00 ArgoLab e compilazione (trasferta esclusa)		41119002

NEW TCF SERIE super

- Campo di lavoro: +10 °C Ta ... +300 °C
- Display touchscreen da 4" a colori
- Monitoraggio grafico in tempo reale
- 10 programmi memorizzabili
- Gestione multi-utente a 3 livelli con password
- Registrazione allarmi, operazioni e dati
- Scarico diretto su USB
- Rampe di temperatura configurabili

Offre un **display touchscreen da 4 pollici** con visualizzazione simultanea di tutti i parametri, incluso il **monitoraggio grafico** in tempo reale della temperatura e dello stato dei programmi. Dotata di un sistema di allarmi visivi e acustici, facilmente tacitabili, la stufa include anche una **gestione utente avanzata con tre livelli di autorizzazione**, ciascuno protetto da password, per una maggiore sicurezza sui parametri operativi.

Ventilazione regolabile su 3 livelli di intensità: High, Medium, Low.

Il timer digitale programmabile consente cicli fino a 99 ore e 59 minuti, con opzioni di funzionamento continuo e partenza ritardata. Un **interruttore porta** facilita il carico e scarico sicuro dei campioni, e la funzione **"temperatura sicura"** limita automaticamente la temperatura massima per proteggere i campioni in ogni fase del ciclo.

La stufa supporta **rampe di temperatura configurabili**, ideali per gestire cicli termici complessi, e offre un **sistema di archiviazione** completo che include registri di allarmi, operazioni e dati. Tutte le informazioni possono essere scaricate direttamente su **chiavetta USB**, garantendo documentazione e tracciabilità avanzata.



Conforme alla **Classe di sicurezza 3.1 (DIN 12880)**, la stufa include un regolatore di temperatura massima a espansione di fluido e un **foro integrato (Ø 5 mm)** per l'inserimento di sensori esterni, assicurando il controllo e la certificazione della temperatura interna. Una soluzione versatile e sicura, perfetta per le applicazioni più esigenti.

Camera in acciaio inossidabile con angoli arrotondati, supporti e **ripiani antibaltamento** completamente removibili per una pulizia semplice e accurata.

Alimentazione 220 ± 10% V - 50/60 Hz.

Forniti di serie:

ripiani grigliati in acciaio (2 ripiani per i modelli fino a 50 litri, 3 ripiani per i modelli superiori), rapporto di taratura a 150°C eseguito con strumento riferibile Accredia, e chiavetta USB per la registrazione e il trasferimento dei dati.

MODELLI TCF SUPER

	Nome	Volume (litri)	Stabilità a 150 °C	Omogeneità a 150 (°C)	Dim. esterne L x P x A (mm)	Peso (kg)	Potenza (W)	Codice
NEW	TCF 50 SUPER	50	± 0,3	± 2%	690 x 640 x 635	54	980	41200602
NEW	TCF 120 SUPER	120	± 0,3	± 2%	810 x 760 x 750	74	1900	41200612
NEW	TCF 200 SUPER	200	± 0,4	± 2%	945 x 825 x 870	103	2400	41200622
NEW	TCF 400 SUPER	400	± 0,5	± 2%	1285 x 820 x 1060	160	3200	41200632

MODELLI TCF PLUS

	Nome	Volume (litri)	Stabilità a 150 °C	Omogeneità a 150 (°C)	Dim. esterne L x P x A (mm)	Peso (kg)	Potenza (W)	Codice
NEW	TCF 50 PLUS	50	± 0,3	± 2%	690 x 640 x 635	54	980	41200202
NEW	TCF 120 PLUS	120	± 0,3	± 2%	810 x 760 x 750	74	1900	41200212
NEW	TCF 200 PLUS	200	± 0,4	± 2%	945 x 825 x 870	103	2400	41200222
NEW	TCF 400 PLUS	400	± 0,5	± 2%	1285 x 820 x 1060	160	3200	41200232

NEW TCF SERIE Plus

- Campo di lavoro: +10 °C Ta ... +300 °C
- Display LED retroilluminato
- 10 programmi memorizzabili
- Registrazione dati
- Scarico diretto su USB

La stufa ArgoLab versione PLUS offre un display **LCD retroilluminato nero** che consente la visualizzazione simultanea di tutti i parametri principali, tra cui temperatura reale e quella impostata. Dotata di un sistema di allarmi visivi e acustici, facilmente tacitabili, la stufa include anche una **porta USB*** per lo scarico dei dati.

Ventilazione regolabile su 3 livelli di intensità: High, Medium, Low.

Il timer digitale programmabile consente cicli fino a 99 ore e 59 minuti, con opzioni di funzionamento continuo e partenza ritardata. Un **interruttore porta*** facilita il carico e scarico sicuro dei campioni, e la funzione "temperatura sicura" limita automaticamente la temperatura massima per proteggere i campioni in ogni fase del ciclo.

Il sistema di **archiviazione dei dati*** è completo e supporta il trasferimento diretto su **chiavetta USB**, garantendo una gestione dei dati semplice e sicura.



Conforme alla **Classe di sicurezza 3.1 (DIN 12880)**, la stufa include un regolatore di temperatura massima a espansione di fluido e un **foro integrato (Ø 5 mm)** per l'inserimento di sensori esterni, assicurando il controllo e la certificazione della temperatura interna. Una soluzione versatile e sicura, perfetta per le applicazioni più esigenti.

Camera in acciaio inossidabile con angoli arrotondati, supporti e **ripiani antiribaltamento** completamente removibili per una pulizia semplice e accurata.

Alimentazione 220 ± 10% V - 50/60 Hz.

Forniti di serie:

ripiani grigliati in acciaio (2 ripiani per i modelli fino a 50 litri, 3 ripiani per i modelli superiori), rapporto di taratura a 150°C eseguito con strumento riferibile Accredia, e chiavetta USB per la registrazione e il trasferimento dei dati.

ACCESSORI TCF (SUPER E PLUS)

Descrizione	Foto	Codice
Ripiano grigliato in acciaio per TCF 50		41100102
Ripiano grigliato in acciaio per TCF 120		41100112
Ripiano grigliato in acciaio per TCF 200		41100122
Ripiano grigliato in acciaio per TCF 400		41100132
Supporto forato per ripiano TCF 50		41100152
Supporto forato per ripiano TCF 120		41100162
Supporto forato per ripiano TCF 200		41100172
Supporto forato per ripiano TCF 400		41100182
Foro Ø interno 25 mm completo di tappi di chiusura (solo su pareti evidenziate in figura - specificare posizione)		41110152
Foro Ø interno 50 mm completo di tappi di chiusura (solo su pareti evidenziate in figura - specificare posizione)		41110142
Ruote per TCF 200 e TCF 400. Set di 4 pezzi		41101172
Manuale IQ-00 ArgoLab e compilazione (trasferta esclusa)		41119002

NEW ICN SERIE super

- Campo di lavoro: : +5 °C Ta ... +70 °C
- Display touchscreen da 4" a colori
- Monitoraggio grafico in tempo reale
- 10 programmi memorizzabili
- Gestione multi-utente a 3 livelli con password
- Registrazione allarmi, operazioni e dati
- Scarico diretto su USB
- Rampe di temperatura configurabili

L'incubatore a convezione naturale ArgoLab versione SUPER è dotato di un **display touchscreen da 4 pollici** che permette la visualizzazione simultanea di tutti i parametri operativi, incluso il **monitoraggio grafico** in tempo reale della temperatura e dello stato dei programmi. Il sistema di allarmi visivi e acustici è facilmente tacitabile, mentre la **gestione utente avanzata** prevede tre livelli di autorizzazione protetti da password per garantire la massima sicurezza sui parametri operativi.

Lo strumento risponde **alla classe di sicurezza 2 (DIN 12880)**.

L'incubatore supporta **rampe di temperatura** configurabili, ideali per gestire cicli termici complessi, e dispone di un **sistema di archiviazione** completo che include registri di allarmi, operazioni e dati. Tutte le informazioni possono essere scaricate direttamente su **chiavetta USB**, garantendo documentazione e tracciabilità avanzata. Per una maggiore versatilità, l'incubatore include un **foro integrato (Ø 5 mm)** per l'inserimento di sensori esterni, assicurando così il controllo e



la certificazione della temperatura interna.

La camera è realizzata in acciaio inossidabile con angoli arrotondati, supporti e ripiani **antiribaltamento** completamente removibili per una pulizia semplice e accurata.

Per osservare i campioni senza dispersione di calore, i modelli ICN 16 e ICN 35 sono dotati di un'ampia **finestratura in vetro** sulla porta, mentre i restanti modelli dispongono di una **doppia porta** (con porta interna in vetro).

Alimentazione: 220 ± 10% V - 50/60 Hz.

Forniti di serie:

ripiani grigliati in acciaio (2 ripiani per i modelli fino a 50 litri, 3 ripiani per i modelli superiori), rapporto di taratura a 37°C eseguito con strumento riferibile Accredia e chiavetta USB per la registrazione e il trasferimento dei dati.

MODELLI ICN SUPER

	Nome	Volume (litri)	Stabilità a 37 °C	Omogeneità a 37 (°C)	Dim. esterne L x P x A (mm)	Peso (kg)	Potenza (W)	Codice
NEW	ICN 16 SUPER	16	± 0,3	± 0,4	530 x 450 x 370	23	85	41201302
NEW	ICN 35 SUPER	35	± 0,3	± 0,4	620 x 510 x 440	33	125	41201312
NEW	ICN 55 SUPER	55	± 0,3	± 0,5	660 x 600 x 500	42	250	41201322
NEW	ICN 120 SUPER	120	± 0,3	± 0,5	780 x 700 x 610	61	350	41201332
NEW	ICN 200 SUPER	200	± 0,3	± 0,5	875 x 760 x 755	77	600	41201342

MODELLI ICN PLUS

	Nome	Volume (litri)	Stabilità a 37 °C	Omogeneità a 37 (°C)	Dim. esterne L x P x A (mm)	Peso (kg)	Potenza (W)	Codice
NEW	ICN 16 PLUS	16	± 0,3	± 0,4	530 x 450 x 370	23	85	41201002
NEW	ICN 35 PLUS	35	± 0,3	± 0,4	620 x 510 x 440	33	125	41201012
NEW	ICN 55 PLUS	55	± 0,3	± 0,5	660 x 600 x 500	42	250	41201022
NEW	ICN 120 PLUS	120	± 0,3	± 0,5	780 x 700 x 610	61	350	41201032
NEW	ICN 200 PLUS	200	± 0,3	± 0,5	875 x 760 x 755	77	600	41201042

NEW

ICN

SERIE Plus

- Campo di lavoro: +5 °C Ta ... +70 °C
- Display LED retroilluminato
- 10 programmi memorizzabili
- Registrazione dati
- Scarico diretto su USB



L'incubatore ArgoLab versione PLUS è dotato di un display LCD **retroilluminato** nero che consente la visualizzazione simultanea di tutti i parametri principali, tra cui la temperatura reale e quella impostata. Il sistema di allarmi visivi e acustici è facilmente tacitabile, e l'incubatore include una **porta USB** per lo scarico dei dati.

Il timer digitale programmabile consente cicli fino a 99 ore e 59 minuti, con opzioni di funzionamento continuo e partenza ritardata. Un interruttore porta facilita il carico e scarico sicuro dei campioni, mentre la funzione di **"temperatura sicura"** limita automaticamente la temperatura massima per proteggere i campioni durante ogni fase del ciclo.

Il **sistema di archiviazione** dei dati è completo e consente il trasferimento diretto su chiavetta USB, per una gestione dei dati semplice e sicura. Conforme alla **Classe di sicurezza 2 (DIN 12880)**, l'incubatore include un **foro integrato (Ø 5 mm)** per l'inserimento di sensori esterni, garantendo il controllo e la certificazione della temperatura interna.

Osservazione dei campioni senza dispersione di calore: i modelli ICN 16 e ICN 35 sono dotati di un'ampia finestratura in vetro sulla porta per monitorare i campioni senza alterare la temperatura interna. I restanti modelli sono dotati di una doppia porta (con porta interna in vetro) per lo stesso scopo.

La camera è realizzata in acciaio inossidabile con angoli arrotondati, e i supporti e **ripiani antibaltamento** sono completamente removibili per una pulizia semplice e accurata.

Alimentazione: 220 ± 10% V - 50/60 Hz.

Forniti di serie:

ripiani grigliati in acciaio (2 ripiani per i modelli fino a 50 litri, 3 ripiani per i modelli superiori), rapporto di taratura a 37°C eseguito con strumento riferibile Accredia, e chiavetta USB per la registrazione e il trasferimento dei dati.

ACCESSORI ICN (SUPER E PLUS)

Descrizione	Foto	Codice
Ripiano grigliato in acciaio per ICN 16		41101112
Ripiano grigliato in acciaio per ICN 35		41101122
Ripiano grigliato in acciaio per ICN 55		41101132
Ripiano grigliato in acciaio per ICN 120		41101142
Ripiano grigliato in acciaio per ICN 200		41101152
Ruote per ICN 200. Set di 4 pezzi		41101172
Manuale IQ-00 Argolab e compilazione (trasferta esclusa)		41119002

ESTENSIONE GARANZIA ARGOLAB TCN / ICN PLUS - SUPER CONVEZIONE NATURALE

- Sconto del 50% su componentistica di ricambio soggetta ad usura, tra cui: sonde di temperatura, elementi riscaldanti.

1 anno 41199009

2 anni 41199019

3 anni 41199029

NEW ICF SERIE super

- Campo di lavoro: : +5 °C Ta ... +80 °C
- Programma sterilizzazione a 130 °C
- Display touchscreen da 4" a colori
- Monitoraggio grafico in tempo reale
- 10 programmi memorizzabili
- Gestione multi-utente a 3 livelli con password
- Registrazione allarmi, operazioni e dati
- Scarico diretto su USB
- Rampe di temperatura configurabili

L'incubatore a convezione naturale ArgoLab versione SUPER è dotato di un **display touchscreen da 4 pollici** che permette la visualizzazione simultanea di tutti i parametri operativi, incluso il **monitoraggio grafico** in tempo reale della temperatura e dello stato dei programmi. Il sistema di allarmi visivi e acustici è facilmente tacitabile, mentre la **gestione utente avanzata** prevede tre livelli di autorizzazione protetti da password per garantire la massima sicurezza sui parametri operativi.

Ventilazione regolabile su 3 livelli: High, Medium, Low.

Il timer digitale programmabile consente cicli fino a 99 ore e 59 minuti, con opzioni di funzionamento continuo, partenza ritardata, e la funzione di **"temperatura sicura"**, che limita automaticamente la temperatura massima per proteggere i campioni durante l'intero ciclo.

Conforme alla **Classe di sicurezza 3.1 (DIN 12880)**, l'incubatore include un regolatore di temperatura massima a espansione di fluido e un **foro integrato (Ø 5 mm)** per l'inserimento di sensori esterni, assicurando il controllo e la certificazione della temperatura interna. Una soluzione versatile e sicura, perfetta per le applicazioni più esigenti.



L'incubatore supporta **rampe di temperatura** configurabili, ideali per gestire cicli termici complessi, e dispone di un **sistema di archiviazione** completo che include registri di allarmi, operazioni e dati. Tutte le informazioni possono essere scaricate direttamente su **chiavetta USB**, garantendo documentazione e tracciabilità avanzata.

La camera è realizzata in **acciaio inossidabile** con angoli arrotondati, supporti e **ripiani antiribaltamento** completamente removibili per una pulizia semplice e accurata.

Per osservare i campioni senza dispersione di calore, i modelli dispongono di una doppia porta (con porta interna in vetro).

Alimentazione: 220 ± 10% V - 50/60 Hz.

Forniti di serie:

ripiani grigliati in acciaio (2 ripiani per i modelli fino a 50 litri, 3 ripiani per i modelli superiori), rapporto di taratura a 37°C eseguito con strumento riferibile Accredia e chiavetta USB per la registrazione e il trasferimento dei dati.

MODELLI ICF SUPER

	Nome	Volume (litri)	Stabilità a 37 °C	Omogeneità a 37 (°C)	Dim. esterne L x P x A (mm)	Peso (kg)	Potenza (W)	Codice
NEW	ICF 55 SUPER	57	± 0,1	± 0,3	690 x 620 x 650	56	350	41200902
NEW	ICF 120 SUPER	120	± 0,1	± 0,4	810 x 760 x 750	74	600	41200912
NEW	ICF 200 SUPER	200	± 0,2	± 0,4	945 x 825 x 870	103	700	41200922
NEW	ICF 400 SUPER	400	± 0,3	± 0,5	1285 x 820 x 1060	160	1500	41200932

MODELLI ICF PLUS

	Nome	Volume (litri)	Stabilità a 37 °C	Omogeneità a 37 (°C)	Dim. esterne L x P x A (mm)	Peso (kg)	Potenza (W)	Codice
NEW	ICF 55 PLUS	57	± 0,1	± 0,3	690 x 620 x 650	56	350	41200802
NEW	ICF 120 PLUS	120	± 0,1	± 0,4	810 x 760 x 750	74	600	41200812
NEW	ICF 200 PLUS	200	± 0,2	± 0,4	945 x 825 x 870	103	700	41200822
NEW	ICF 400 PLUS	400	± 0,3	± 0,5	1285 x 820 x 1060	160	1500	41200832

NEW

ICF

SERIE Plus

- Campo di lavoro: +5 °C Ta ... +70 °C
- Programma sterilizzazione a 130 °C
- Display LED retroilluminato
- 10 programmi memorizzabili
- Registrazione dati
- Scarico diretto su USB

L'incubatore ArgoLab versione PLUS è dotato di un display LCD **retroilluminato** nero che consente la visualizzazione simultanea di tutti i parametri principali, tra cui la temperatura reale e quella impostata. Il sistema di allarmi visivi e acustici è facilmente tacitabile, e l'incubatore include una **porta USB** per lo scarico dei dati.

Ventilazione regolabile su 3 livelli: High, Medium, Low.

Il timer digitale programmabile consente cicli fino a 99 ore e 59 minuti, con opzioni di funzionamento continuo e partenza ritardata. Un interruttore porta facilita il carico e scarico sicuro dei campioni, mentre la funzione di **"temperatura sicura"** limita automaticamente la temperatura massima per proteggere i campioni durante ogni fase del ciclo.

Conforme alla Classe di sicurezza 3.1 (DIN 12880), l'incubatore include un regolatore di temperatura massima a espansione di fluido e un **foro integrato (Ø 5 mm)** per l'inserimento di sensori esterni, assicurando il controllo e la certificazione della temperatura interna. Una soluzione versatile e sicura, perfetta per le applicazioni più esigenti.



Il **sistema di archiviazione** dei dati è completo e consente il trasferimento diretto su **chiavetta USB**, per una gestione dei dati semplice e sicura.

Per **osservare i campioni senza dispersione di calore**, i modelli dispongono di una doppia porta (con porta interna in vetro).

La camera è realizzata in **acciaio inossidabile** con angoli arrotondati, e i supporti e **ripiani antiribaltamento** sono completamente removibili per una pulizia semplice e accurata.

Alimentazione: 220 ± 10% V - 50/60 Hz.

Forniti di serie:

ripiani grigliati in acciaio (2 ripiani per i modelli fino a 50 litri, 3 ripiani per i modelli superiori), rapporto di taratura a 37°C eseguito con strumento riferibile Accredia, e chiavetta USB per la registrazione e il trasferimento dei dati.

Descrizione	Foto	Codice
Ripiano grigliato in acciaio per ICF 55		41100102
Ripiano grigliato in acciaio per ICF 120		41100112
Ripiano grigliato in acciaio per ICF 200		41100122
Ripiano grigliato in acciaio per ICF 400		41100132
Supporto forato per ripiano ICF 55		41100152
Supporto forato per ripiano ICF 120		41100162
Supporto forato per ripiano ICF 200		41100172
Supporto forato per ripiano ICF 400		41100182
Foro Ø interno 25 mm completo di tappi di chiusura (solo su pareti evidenziate in figura - specificare posizione)		41110152
Foro Ø interno 50 mm completo di tappi di chiusura (solo su pareti evidenziate in figura - specificare posizione)		41110142
Ruote per ICF 200 e ICF 400. Set di 4 pezzi		41101172
Manuale IQ-00 ArgoLab e compilazione (trasferta esclusa)		41119002